

BCA

Codice: 0BCA

Set monouso per biopsie aspirate, istologiche e citologiche
(Sistema Menghini modificato)

A



Sistema
semi-automatico

B



Pulsante di sparo
silenzioso

C



Cannula sfilabile su
siringa Luer Lock

D



Stopper scorrevole
Echo-marker interno
Cannula centimetrata

E



Punta atraumatica ad
elevata penetrazione

F



Cannula ultra-sottile
con affilatura bioptica



CE
0426

biomedical

BCA


Codice: 0BCA

Set monouso per biopsie aspirate, istologiche e citologiche (Sistema Menghini modificato)

Istruzioni per l'uso:



1
Prima di iniziare la biopsia premere il pistone per caricare la molla

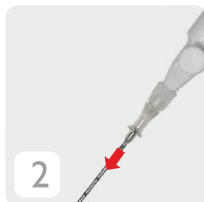

2
Penetrare nel tessuto fino alla superficie dell'organo.



3
Premere il pulsante per attivare il pistone.



4
Penetrare il tessuto, poi estrarre l'ago.



5
Premere il bottone per estrarre il campione.

Per ordinare:

CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONE	CODICE C.
0BCA1610	16Gx10 cm	20	BIANCO
0BCA1615	16Gx15 cm	20	BIANCO
0BCA1620	16Gx20 cm	20	BIANCO
0BCA1625	16Gx25 cm	20	BIANCO
0BCA1710	17Gx10 cm	20	ROSSO-VIOLA
0BCA1715	17Gx15 cm	20	ROSSO-VIOLA
0BCA1720	17Gx20 cm	20	ROSSO-VIOLA
0BCA1725	17Gx25 cm	20	ROSSO-VIOLA
0BCA1810	18Gx10 cm	20	ROSA
0BCA1815	18Gx15 cm	20	ROSA
0BCA1820	18Gx20 cm	20	ROSA
0BCA1825	18Gx25 cm	20	ROSA
0BCA1910	19Gx10 cm	20	CREMA
0BCA1915	19Gx15 cm	20	CREMA
0BCA1920	19Gx20 cm	20	CREMA
0BCA1925	19Gx25 cm	20	CREMA
0BCA2010	20Gx10 cm	20	GIALLO
0BCA2015	20Gx15 cm	20	GIALLO
0BCA2020	20Gx20 cm	20	GIALLO
0BCA2025	20Gx25 cm	20	GIALLO
0BCA2110	21Gx10 cm	20	VERDE SCURO
0BCA2115	21Gx15 cm	20	VERDE SCURO
0BCA2120	21Gx20 cm	20	VERDE SCURO
0BCA2125	21Gx25 cm	20	VERDE SCURO
0BCA2210	22Gx10 cm	20	NERO
0BCA2215	22Gx15 cm	20	NERO
0BCA2220	22Gx20 cm	20	NERO
0BCA2225	22Gx25 cm	20	NERO

Sono disponibili su richiesta aghi di misure diverse da quelle indicate e diametro 23G

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea
Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
Aghi per cito-aspirazione
Aghi specialistici e set
Aghi e set per anestesia loco-regionale
Teli termici e tappetini assorbenti