

Biotherm

Codice: Biotherm


Telo termico ad alta protezione contro l'ipotermia favorisce il recupero del calore perduto



Radio trasparente




Antistatico

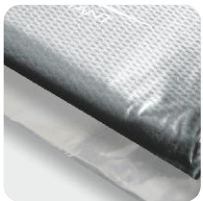

Anti-allergico



Anti-strappo

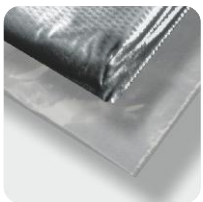

Anti-scivolo



CE

biomedical



Biotherm

Codice: Biotherm

Telo termico ad alta protezione contro l'ipotermia favorisce il recupero del calore perduto

Per ordinare:

CODICE

CONFEZIONE

BI000	Copricapo adulto	120
BI010	Copricapo Bambino	120



B3000	Guanto per pusossimetro	120
-------	-------------------------	-----



BI100	Gambale 100 cm	50
-------	----------------	----



BI150	Lenzuolo speciale pediatrico (75x77cm)	100
-------	----------------------------------------	-----



BI200	Lenzuolo S (60x60cm)	80
BI250	Lenzuolo dim. speciale (60x90cm)	50
BI255	Lenzuolo dim. speciale (90x120cm)	50
BI300	Lenzuolo M (120x120cm)	50
BI400	Lenzuolo L (210x120cm)	40



B0950	Rotolo (1,15x50m)	2
-------	-------------------	---



Biotherm è costituito da un supporto di polietilene antistatico, non conduttivo e radiotrasparente, impregnato laminarmente a livello del polimero con un agente alluminizzante.

Successivamente viene gofrato ed accoppiato a caldo, senza l'impiego di solventi, con polpa di cellulosa naturale a fibra lunga non tessuta.

Biotherm è sterilizzabile, riflette il calore ma non la luce, contiene la traspirazione senza eliminarla, è dotato di caratteristiche antiscivolo e di buona drappeggiabilità, non irritante, anallergico, inodore, antistrappo, può essere ritagliato a misura senza sfilacciarsi o rilasciare fibre o particelle.

Non contiene additivi, se eliminato tramite combustione non rilascia fumi, sostanze volatili o residui tossici ed inquinanti, sul lato interno si bagna a macchia di leopardo, sul lato esterno è idrorepellente.

M-721-021 rev. A del 03/09/2012



biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti