

TATO_{pro}

Disposable microwave thermal ablation probes to use with TATO

NEW



Optimal ablation shape



Ergonomic handling



18 Gauge shaft




Connector for drug injection



Up to 4 applicators per procedure



Reusable cable

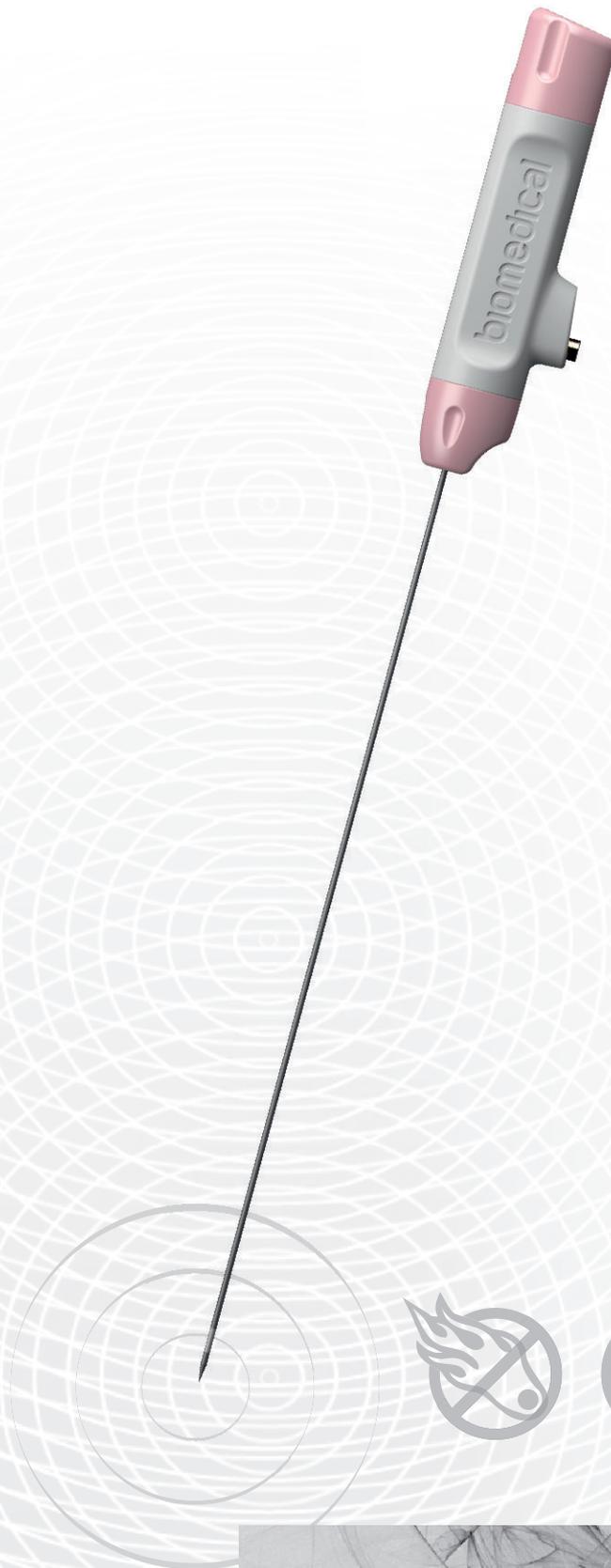

biomedical

TATO_{pro}

Disposable microwave thermal ablation probes to use with TATO



A wide range of choice: TATOpro is the only probe that comes with the 18G version, a size that opens the door to new applications, such as thyroid, prostatic thermal ablation and that makes liver ablation safer. TATOpro also comes in traditional 14G and 17G sizes and 11G version for intraoperative ablation.

Possibility of injecting drugs: TATOpro are the first applicators that can be provided of a cannula. They are designed to allow the injection of chemotherapeutic/anesthetic drugs or biological agents simultaneously to the ablation procedure.

Allowing a precise positioning of the needle: TATOpro can be disjointed from the cables carrying the microwaves, so they can be easily positioned under CT scan, to be connected back only when the procedure begins.

Absence of collateral effects: TATOpro are the only applicators that can work uncooled. Even without activating the cooling system, they perform a safe procedure that doesn't lead to carbonization, vaporization or comet effect.



To order:

TYPE	SIZE	PACKAGE	C. CODE
TTP	11G15cm	1	WHITE
TTP	14G15cm	1	DARK GREEN
TTP	14G20cm	1	DARK GREEN
TTP	17G15cm	1	RED VIOLET
TTP	17G20cm	1	RED VIOLET
TTP	18G15cm	1	PINK
TTP	18G20cm	1	PINK
TTP	18G25cm	1	PINK

Available in the following variants :

- Applicator with cable:
 - Straight cable jacks
 - Right angle cable plug
- Applicator without cable
- With stylet

TATOpro 14G and 17G are also available with the stylet with Luer lock tip.



biomedical

Biomedical srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
 Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
 www.biomedical-bio.net sales@biomedical-bio.net

Echogenic needles
Bone biopsy needles
Guillotine needles for biopsy on soft tissues
Cyto-aspiration needles
Different specialistic needles and sets
Loco-regional anaesthesia needles and sets
Thermic and absorbing sheets